
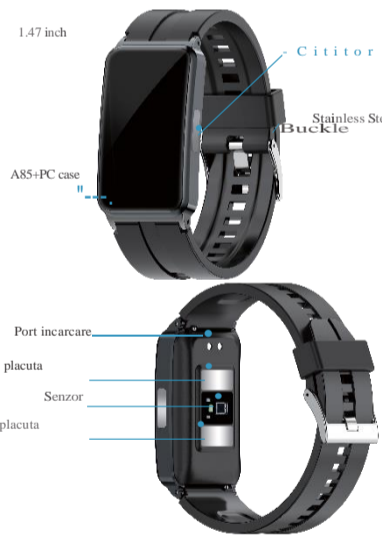






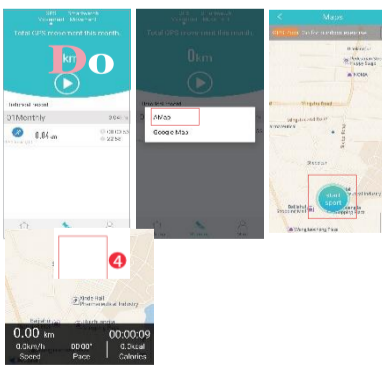


<p>Brățară inteligentă ECG/glucoză din sânge/tensiune arterială</p>  <p>Manual utilizare EP01/EP02</p>	<p>Structura:</p>  <p>1.47 inch Cliticor Stainless Steel Buckle ABS+PC case Port incarcare plicita Senzor plicita</p>	<p>Demontarea si uzura</p> <p>1. Demontare Alinați stilul metalic de la capătul stâng al curelei ceasului cu vîrfurile de la punctul de conectare al brățării, bile de metal hip hild de metal din dreapta și alinați vîrfurile din dreapta pentru a finaliza instalarea și demontarea.</p> <p>2. Uzură Este mai bine purtat ceasul la 1-2CM, în spatele gîtului ulnar al incheieturii mîinii. Când îl purtați, asigurați-vă că partea inferioară a ceasului este aproape de piele pentru a evita scurgerea de lumină a senzorului și pentru a afecta acuratațea.</p> <p>Incarcarea Incarcarea este magnetica, doar pozitioneaza corect cablul de incarcare</p>  <p>Port incarcare Power on /off</p>	<p>Tine lung pe ecran pentru a porni bratară Switch off: In setari gaseste butonul rosu si apasa</p>  <p>Instalare aplicatie si conectare cu bluetooth Porniți dispozitivul, porniți Bluetooth de pe telefonul mobil, scanați codul QR de mai jos sau căutați „H Band” în App Store/Google Play Store pentru a descărca și instala.</p> 	<p>2. Înregistrați-vă și conectați-vă Vă rugăm să vă înregistrați cu o e-mail sau un număr de mobil dacă nu aveți un cont H Band sau puteți alege „Autentificare fără cont” pentru a intra</p> <p>3. Deschideți aplicația, la interfața de conectare vă rugăm să atingeți „Scanați dispozitivul”, porniți Bluetooth, apoi găsiți dispozitivul corespunzător pentru a vă conecta. De asemenea, puteți merge la panoul de date pentru a vă conecta</p> <p>Introducerea funcției dispozitivului 1. Ora, data și săptămîna Comutați la această interfață, măsurarea automată a inimii, pictograma începe să clipească, apoi arată rezultatul. 7. Monitorizarea tensiunii arteriale Comutați la această interfață, măsurarea automată a tensiunii arteriale, pictograma începe să clipească, apoi arată rezultatul.</p>	<p>Ghid de utilizare</p> <p>Shortcut Ghiveaza in jos interfața Ghiveaza in sus</p> <p>Pasi Hei rate Presiune sange CCC Glicemie O x i g e n i n s a n g e Temperatura</p> <p>Sleep Well Ghiveaza in sus</p> <p>De la stanga la dreapta</p> <p>Introducerea funcției dispozitivului 1. Ora, data și săptămîna Comutați la această interfață, măsurarea automată a inimii, pictograma începe să clipească, apoi arată rezultatul. 7. Monitorizarea tensiunii arteriale Comutați la această interfață, măsurarea automată a tensiunii arteriale, pictograma începe să clipească, apoi arată rezultatul.</p>	<p>3.Shortcut Ghiveaza in jos pe interfața de timp principală pentru a intra în interfața de comenzi rapide derulante. Funcțiile specifice sunt următoarele: Găsiți telefon/Despre/Setări/No deranja/Luminozitate 4. Antrenamente Apăsați butonul din partea dreaptă a ceasului pentru a găsi sportul. După cum urmează: alegare în aer liber, mers în aer liber, alergare în interior, mers în interior, Strumet, stopper, ciclism în aer liber, Ciclism în aer liber, eliptic, mașină, mașină de vîslit mult de mult de 20 de tipuri de sport pentru a alege. 5. pedometru Pasi, calorile arse și distanța vor fi afișate pe această interfață.</p> <p>6. monitorizarea ritmului cardiac Q) Comutați la această interfață, măsurarea automată a inimii, pictograma începe să clipească, apoi arată rezultatul. 7. monitorizarea tensiunii arteriale Comutați la această interfață, măsurarea automată a tensiunii arteriale, pictograma începe să clipească, apoi arată rezultatul.</p>	 <p>Uzura și întreținerea Produsele sunt potrivite pentru a fi purtate toată ziua, așa că atunci când purtați și înghițiți dispozitivul smart, vă rugăm să urmați următoarele instrucțiuni scurte:</p> <ol style="list-style-type: none"> Păstrați dispozitivul inteligent uscat: 1.1. Curățați-vă incheietura mîinii și cureaua inteligentă/ceasul inteligent pe care îl purtați în mod regulat, în special după exerciții fizice, transpirație sau contactul cu pielea cu săpun sau detergenți și alte substanțe. Substanța poate pătrunde în interiorul produsului, așa că trebuie curățată regulat. 2. Continuați să purtați produsul corect 2.1. Te rog nu purtați dispozitivul prea strâns, ar trebui să puteți mișca bock și înapoi pe incheietura mîinii. 2.2. Dacă utilizați un dispozitiv de ritm cardiac pentru a vă înregistra ritmul cardiac pe tot parcursul zilei, dispozitivul trebuie să fie plat cu un deget lat între osul incheieturii mîinii. Pentru a verifica mai bine datele în timpul exercițiilor active, purtați dispozitivul între osul incheieturii la aproximativ 2-3 degete. 2.3. Frecarea și reținerrea prelungite vă pot irita pielea, după o lungă perioadă de timp, scadeți dispozitivul și acordați-i pieii o perioadă de odihnă. 3. Păstrați dispozitivele inteligente curate: 3.1. Dacă dispozitivul este dimp, cum ar fi transpirație sau stropire, vă rugăm să curățați și să-l uscați, asigurați-vă că stratul de piele este într-o umiditate uscată adecvată și apoi să puneți înapoi. <p>Datele colectate de acest dispozitiv sunt doar pentru referință, nu în scop medical Avertisment: Acest produs nu este un dispozitiv medical, iar brățara și funcțiile acestuia nu trebuie utilizate pentru diagnosticul, tratamentul sau prevenirea bolilor și simptome. Dacă aveți schimbări obiective sportive, somn etc., vă rugăm să consultați un medic profesionist calificat personalului pentru a evita accidentele majore. Compania noastră își rezervă dreptul de a modifica și îmbunătăți orice funcție descrisă în această instrucțiune fără notificare prealabilă. În același timp, compania noastră își rezervă dreptul de a actualiza în mod constant conținutul produsului și tot conținutul va fi supus obiectelor materiale.</p>
<p>8. ECGtest Comutați la interfața ECG. Faceți clic pe butonul pentru starea de test ECG și puneți-vă zăbovitul pe electroful drept. Vă rugăm să vă asigurați că dispozitivul este purtat corect la încheietura mîinii și că pielea este umedă, iar rezultatul este anunțat. Rezultatul din acest manual</p>  <p>testarea pe brățară nu va fi salvată în aplicație. Dacă doriți să salvați datele, vă rugăm să înregistrați testarea ECG pe aplicație. Datele vor fi afișate pe un grafic.</p> <p>Puneți degetul pe electrodul drept.</p> <p>9. Monitorizarea glicemiei @ Comutați la această interfață, atingeți butonul triunghi de mai jos, pictograma începe să clipească, apoi arată rezultatul. 10. Monitorizarea oxigenului din sânge * Comutați la această interfață, Măsurarea automată a oxigenului din sânge, Pictograma începe să fie Haș, apoi arată rezultatul. 11. Monitorizarea temperaturii corpului @ Comutați la această interfață, atingeți butonul triunghi de mai jos, pictograma începe să clipească, apoi arată rezultatul. 12.Sleepmonitoring * Comutați la această interfață, verificați durata somnului profund, somnul ușor, durata somnului total și calitatea somnului. 13. Vremea [1] Când dispozitivul este conectat la APP, vremea se va sincroniza automat.</p>	<p>14. Notificare @ Sincronizați apelurile primite, mesajele text, QQ, WeChat și alte mesaje software de aplicație, fără a pierde niciodată niciun mesaj important oricând și oriunde. 15. Alarmă @ Comutați la această interfață de funcție, pentru a găsi ceasul, când alarma nu este setată, este afișată în partea dreaptă: APP găsiți „My”, atingeți „EPOI” pentru a găsi „Setări alarmă”, atingeți colțul din dreapta sus „+”, modificarea setării finalizate se va afișa pe dispozitiv. 15. Cronometru @ Atingeți pentru a intra în interfața cronometrului, atingeți butonul din mijloc pentru a porni sau Interupe, Pentru a recalcula, apăsați butonul de resetare și apăsați butonul de ieșire pentru a reveni. 17. Timer@ Alinați temporizatorul în lista de funcții, reglați timpul pentru a începe cronometru. 18. Muzică @ Când dispozitivul este conectat la APP, software-ul de redare muzicală a fost instalat pe telefon, doar atingeți redare pentru a realiza sincronizarea dispozitivului. Atingeți butonul din mijloc redare/pauză pentru a controla telefonul pentru a reda muzică. 19. Găsiți telefon @ Modificați conectarea Bluetooth, atingeți funcția de căutare a telefonului, telefonul va vibra și va suna. 20. Femeie @ Salvați informațiile personale ca femei. Această funcție poate fi setată în funcție de circumstanțele personale. 21. Camera @ După conectarea Bluetooth, intrați în interfața camerei ceasului, puteți controla telefonul pentru a face fotografii de la distanță. 22. Setări @ Alinați setarea din lista de funcții, după cum urmează: Dreptate/Blocare automată/Comutare/Dată și oră/Bandă H/Apelare/Notificare/Limbă/Despre/Ștergere dată/Oprire.</p>	<p>Funcțiile și instrucțiunile APP 1.Bord @Pasi și timp.@Mai mult (ritm cardiac/tensiune arterială/setare); @Interfața de date pentru pași, distanță și calorii;@Interfața de date pentru somn;@Interfața de date pentru monitorizarea ritmului cardiac;@Interfața de date pentru monitorizarea tensiunii arteriale;@Interfața de date pentru monitorizarea ECG;@ Interfața de date pentru monitorizarea oxigenului din sânge;@Interfața HRVdate;@ Temperatura corpului interfața de date;@Interfața de date pentru ciclul menstrual pentru femei;@Interfața de date pentru glicemia.</p> 	<p>2.Miscarea G) Selectați butonul Mișcare GPS din aplicație. @Selectați software-ul pentru hărți instalat pe telefon. 3.Selectați butonul Start sport. 4.Mergeți în zona deschisă și selectați butonul Pauză dacă GPS-ul este slab.</p> <p>Când exercițiul GPS s-a încheiat, selectați mișcarea dispozitivului, atingeți butonul de pornire și selectați modul de exercițiu pentru a confirma. În același timp, dispozitivul va comuta automat la interfața de date în acest mod sport, aplicația poate fi utilizată pentru a interlope o, exercitarea sau pe dispozitiv și slings Slide pentru a interlope exerciții. În timp ce datele exercițiilor vor fi salvate automat în APP.</p> 	<p>date precise pentru individual, în mod normal, utilizați modul general. S-screen on Time: Setajii timpul de utilizare. Setarea vremii: Setajii temperatura unil/switch pe funcția de apăsare a vremii. Setare comutator: Monitorizare automată HR/Monitorizare automată TA/Monitorizare automată a sîngelui, ygen Monitorizare pe timp de noapte/Alerta de deconectare/Somn stîmptic/Monitorizare automată a temperaturii Faceți o fotografie: după ce conectați Bluetooth și faceți clic pe aplicație pentru a face fotografii, ceasul poate controla telefonul mobil pentru a face fotografii. Resetați parola dispozitivului: resetați parola dispozitivului. Setări de apelare: acceptă alegeți să utilizați cadranul inerent” al dispozitivului sau alegeți „apel foto”. (personalizați pentru a încălca imagini ca vă place), puteți alege, de asemenea, cadranul rafinat al ceasului în „Mai multe fete de ceas- Actualizare firmware: informații actuale despre firmware și</p> <p>3.A mea Informații personale: atingeți avatarul și porcă Egeru a intra, Conținutul este după cum urmează: porecla, seoul, data nașterii, greutatea, înălțimea, IMC, culoarea pielii. Dispozitivul meu: conținutul este după cum urmează@: Notificarea mesaj: primiți/inchideți momentul mesajului aplicației. Setări alarmă: verificați sau creați o alarmă. Stabilirea sedentară: Setajii o oră de reamintire a sedentarismului. Alertă de ritm cardiac: setajii limita superioară a ritmului cardiac în repaus și alarma automată atunci când aceasta atinge sau o depășește. Roți detecta incheieturii mîinii: Intoarceți incheietura mîinii pentru a lumina jerani. Asocierii dispozitiv: legarea dispozitivului. Găsiți dispozitiv: găsiți dispozitivul. BP Private Mode: setajii modul privat pentru a obține mai multe</p>	<p>Setări de apelare: acceptă alegeți să utilizați cadranul inerent” al dispozitivului sau alegeți „apel foto”. (personalizați pentru a încălca imagini ca vă place), puteți alege, de asemenea, cadranul rafinat al ceasului în „Mai multe fete de ceas- Actualizare firmware: informații actuale despre firmware și</p> <p>Actualizări firmware: Ștergeți datele: ștergeți toate datele de pe dispozitiv și opriți. Resetare: Deconectat: Deconectați dispozitivul.</p>	<p>Ajutor: verificați răspunsurile „Nu se poate conecta la dispozitiv”, „Ușor de deconectat dispozitivul” și „Alcășul nu poate fi trimis” Gestionarea permisiunilor: Dbs o parte din permisiunile telefonului mobil în timpul utilizării APP. Obiectivul pașilor: stabilită pași țintă. Setarea unității: Setajii unitățile metrice imperiale. Stilul APP: setajii stilul de fundal al APP. Despre noi: verificați informațiile actuale despre versiunea APP. WeKun: legajii sporturile WeChat. Deconectare: Deconectare din contul curent.</p> <p>Parametru Eg: GPS5.5 Baterie: 210 mAh Afișaj: Ecran color HD de 1.47 inch Impermeabil IP67 Material: Sticlă temperată/ABS+PC Standby: 15 zile /Siliconce Versiune Bluetooth: 5.1 Greutate: 32g Sistem de operare suport: IOS 8.0 sau Time de încărcare: 2 ore peste Android 4.4 sau mai sus Notă 1. Înainte de a măsura, vă rugăm să vă asigurați că aveți informații personale corecte pe aplicația Sived, cum ar fi înălțimea, vârsta, sexul, greutatea etc. și sincronizați datele; 2. Stați timp de 5-10 minute înainte de măsurare pentru a vă păstra bălăle inimii calme și respirația văzabilă. 3. Vă rugăm să vă relaxați în timpul măsurării, gîfățul, vorbitul, mersul și exercițiile fizice vor afecta acuratațea rezultatelor măsurătorii. 4. Păstrați o poziție corectă în șezut, faceți mîinile plate și mențineți-o paralelă cu inima.</p>	<p>Uzura și întreținerea Produsele sunt potrivite pentru a fi purtate toată ziua, așa că atunci când purtați și înghițiți dispozitivul smart, vă rugăm să urmați următoarele instrucțiuni scurte:</p> <ol style="list-style-type: none"> Păstrați dispozitivul inteligent uscat: 1.1. Curățați-vă incheietura mîinii și cureaua inteligentă/ceasul inteligent pe care îl purtați în mod regulat, în special după exerciții fizice, transpirație sau contactul cu pielea cu săpun sau detergenți și alte substanțe. Substanța poate pătrunde în interiorul produsului, așa că trebuie curățată regulat. 2. Continuați să purtați produsul corect 2.1. Te rog nu purtați dispozitivul prea strâns, ar trebui să puteți mișca bock și înapoi pe incheietura mîinii. 2.2. Dacă utilizați un dispozitiv de ritm cardiac pentru a vă înregistra ritmul cardiac pe tot parcursul zilei, dispozitivul trebuie să fie plat cu un deget lat între osul incheieturii mîinii. Pentru a verifica mai bine datele în timpul exercițiilor active, purtați dispozitivul între osul incheieturii la aproximativ 2-3 degete. 2.3. Frecarea și reținerrea prelungite vă pot irita pielea, după o lungă perioadă de timp, scadeți dispozitivul și acordați-i pieii o perioadă de odihnă. 3. Păstrați dispozitivele inteligente curate: 3.1. Dacă dispozitivul este dimp, cum ar fi transpirație sau stropire, vă rugăm să curățați și să-l uscați, asigurați-vă că stratul de piele este într-o umiditate uscată adecvată și apoi să puneți înapoi. <p>Datele colectate de acest dispozitiv sunt doar pentru referință, nu în scop medical Avertisment: Acest produs nu este un dispozitiv medical, iar brățara și funcțiile acestuia nu trebuie utilizate pentru diagnosticul, tratamentul sau prevenirea bolilor și simptome. Dacă aveți schimbări obiective sportive, somn etc., vă rugăm să consultați un medic profesionist calificat personalului pentru a evita accidentele majore. Compania noastră își rezervă dreptul de a modifica și îmbunătăți orice funcție descrisă în această instrucțiune fără notificare prealabilă. În același timp, compania noastră își rezervă dreptul de a actualiza în mod constant conținutul produsului și tot conținutul va fi supus obiectelor materiale.</p>